

## **Инструкция по использованию ультразвуковой зубной щетки со встроенными светодиодами и съёмной силиконовой насадкой F.F.T.-IFB-22000-ninja**

Ультразвуковая зубная щетка F.F.T.-IFB-22000-ninja - это новое решение в уходе за полостью рта, обладает широким спектром применения. Предназначена для ежедневной чистки и отбеливания зубов, предотвращения кариеса, удаления неприятного запаха изо рта, очистки от поддесневого и десневого камня.

Ультразвуковая зубная щетка способна вычищать налет на зубах в сотни раз лучше, чем простая ручная щетка. Зубная щетка имеет удлиненную форму насадки, повторяющую при скользянии анатомическую форму зубов и натуральной десны, тщательно очищает межзубное пространство и другие неровности и изгибы. Благодаря мягкой силиконовой щетине безболезненно очищает язык, щеки и десны.

Ее использование особо эффективно при лечении брекет системами и элайнерами. Щетина щетки устроена таким образом, что к концам утончается, что обеспечивает ей гибкость при чистке, устраняя опасность застревания в брекет системах. За весь период использования съёмная насадка не деформируется, щетинки не меняют форму. Используемый в производстве материал безопасен для здоровья, препятствует наполнению и размножению в ней бактерий, предотвращая заболевания полости рта.

Вибрация ультразвука частотой 22000 раз в минуту взбивает субстанцию из слюны и зубной пасты, благодаря чему разрушаются бактериальные цепочки, уничтожаются 99,9% всех микробов, устраняя неприятный запах изо рта.

Стоматологи рекомендуют использовать ультразвуковую зубную щетку F.F.T.-IFB-22000-ninja с целью поддержания полости рта в здоровом состоянии, а также при ношении и после снятия любых видов брекет систем.

Чистка зубов и десен должна проводиться ежедневно 2 раза в день не менее 2-х минут. При ношении брекет систем длительность может быть увеличена до 3 минут, а рекомендованная частота использования – после каждого приема пищи.

Ультразвуковая зубная щетка F.F.T.-IFB-22000-ninja:

- обеспечивает эффективную чистку зубов вокруг брекет систем благодаря проникновению силиконовых щетинок во все труднодоступные промежутки;
- оказывает минимальную силу давления при чистке зубов на опорные ткани зубов и зубную эмаль;
- снижает болевые ощущения в начале лечения брекет системами.

Работа данной зубной щетки основана на ультразвуковой вибрации, обеспечивающей профилактический массаж. Эффект, который оказывает массаж десен, обусловлен усилением крово- и лимфотока, что провоцирует усиление процессов метаболизма.

**В результате этого наблюдается:**

- улучшение питания клеток слизистой оболочки;
- ускорение кислородного обмена и эвакуации продуктов распада;
- уплотнение структуры тканей пародонта;
- устранение отеков слизистых оболочек;
- усиление местного иммунитета.

Массаж десен, проводимый ежедневно в домашних условиях, служит дополнительной мерой профилактики развития кариеса, образования пародонтальных карманов и формирования в ротовой полости воспалительных процессов.



**Миняев И.В.**



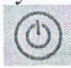

### **Противопоказания к применению:**

- Не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными возможностями.
- Не использовать детям младше 14 лет.



### **Комплектность:**

- Зубная щетка
- Сменная силиконовая насадка (капа)
- Кабель питания
- Коробка

### **Подсоединение:**

- Надеть силиконовую насадку
- Нажмите кнопку 
- Настройте удобный режим чистки, регулируя мощность нажатием стрелок вверх/вниз
- После окончания использования зубной щетки нажмите кнопку 

### **Использование зубной щетки:**

- Прополощите рот
- Наденьте силиконовую насадку на зубную щетку
- Распределите зубную пасту/зубной порошок по щетинкам
- Коснитесь насадкой зубов
- Нажмите кнопку 
- Медленно передвигайте щетку от одного зуба к другому, задерживаясь на поверхности каждого зуба несколько секунд. Почистите жевательные поверхности зубов.
- Чистите десны таким же образом, как и зубы. Сначала снаружи, а затем внутри.
- Очистите язык и щеки.
- По окончании чистки нажмите кнопку 
- Извлеките зубную щетку изо рта

### **Рекомендации после использования зубной щетки:**

- Отсоедините силиконовую насадку от зубной щетки
- Промойте проточной водой, просушите. Не допускайте хранения силиконовой насадки под прямыми солнечными лучами либо на нагретых поверхностях.
- Стоматологи рекомендуют замену силиконовой насадки не реже 1-го раза в 2 недели.
- Зубную щетку протрите сухой салфеткой, храните в коробке

### **Технические характеристики:**

- Мощность 3,7Вт
- Аккумулятор 450mAh
- Время зарядки аккумулятора < 3 часов
- Уровень шума 60dB
- Пульсация 22000 ударов/мин
- Габариты зубной щетки 20см\*3,2см\*2,5см
- Вес зубной щетки 60 гр.



**Миняев И.В.**



### **Инструкция по технике безопасности:**

- Зубная щетка укомплектована аккумулятором. Не бросайте ее в огонь, не нагревайте, не используйте и не оставляйте в местах с высокой температурой воздуха.
- Не используйте поврежденной.
- Не оставляйте и не храните зубную щетку в местах, откуда она может упасть в ванну, раковину, унитаз. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не погружайте зубную щетку в воду.
- Не кладите на нее тяжелые предметы.
- Храните зубную щетку в месте, недоступном для детей. Несоблюдение этого правила может привести к возникновению несчастных случаев и опасных ситуаций (проглатыванию аксессуаров, съемных частей зубной щетки).
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать и разбирать зубную щетку, не ремонтируйте самостоятельно, обратитесь к продавцу данного товара
- Никогда не направляйте луч зубной щетки в глаза, нос, ушные раковины.
- Не используйте зубную щетку не по назначению.

### **Соответствие стандартам:**

Сертификат соответствия № RU C-US.AЖ26.B.01901

### **Гарантийные обязательства:**

Компания производитель предоставляет гарантию 1 год с даты приобретения зубной щетки. Гарантийные обязательства действительны при наличии полного комплекта (зубная щетка, силиконовая насадка, кабель питания, инструкция, заводская коробка, чек или иной документ, подтверждающий покупку).

Данная гарантия не распространяется на случаи повреждения или поломки зубной щетки в результате неправильного использования (см. список ниже), естественного износа, в отношении сменных силиконовых насадок, а также дефектов изделия, не имеющих эффекта для функционирования данной зубной щетки (силиконовая насадка, кабель питания). Гарантия не является действительной в случае ремонта зубной щетки не авторизованными сервисными службами.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

- Использования зубной щетки не по назначению
- Наличия на зубной щетке механического воздействия, повреждений, сколов, трещин
- Наличия следов вскрытия, самостоятельного ремонта
- Наличия следов попадания влаги, иных составов внутрь корпуса зубной щетки
- Наличия дефектов, вызванных форс-мажорными обстоятельствами
- Неправильное напряжение питающего аккумулятора
- Внесение технических изменений
- Наличия других нарушений, изложенных в данной инструкции.

### **Производитель:**

Favorite For Teeth (F.F.T.), USA, Florida State  
2283 NE 164th st North Miami Beach, 33160, USA, США

### **Разработчик:**

Cron-USA LLC, USA, Florida State  
2283 NE 164th st North Miami Beach 33160, USA, США



**Миняев И.В.**